


Medientischaufsatz

Verwendungszweck

- Medienversorgung für Doppelarbeitsstische
- Ausführungsvarianten für gentechnische Bereiche
- Modulare Befestigung von Zellenanbauteilen am Funktionsständer wie Ablagen aus Glas und beschichteter OSB-Platte, Hängeschränken, Stativhaltern etc.
- Werkzeuglose Montage von ergänzenden Medienkanal-Anbauteilen wie Abtropfbord, Monitorhalter, Pipettenhalter, Papierrollenhalter, Universalablage etc.
- Nicht geeignet für Doppeltische, deren Arbeitsflächen getrennt sein müssen (vgl. hierzu BGI/GUV-I 850-0)

Aufbau


Medientischaufsatz mit Cantilever-Tischgestell und eingehängtem Unterbau

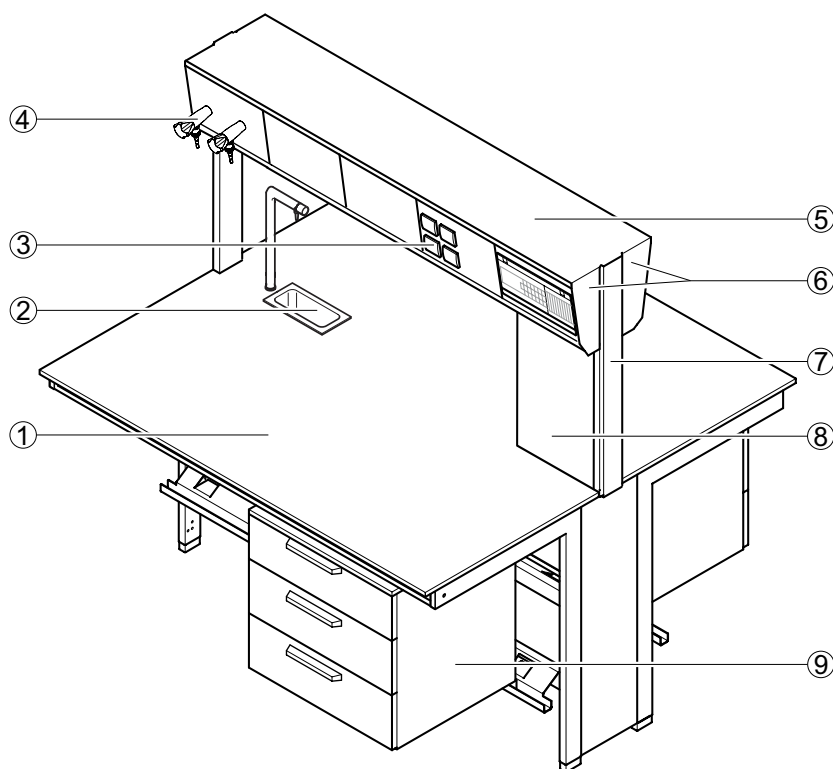


- 1 Arbeitsplatte
- 2 Trichterbecken mit Wasserentnahme
- 3 Medienpanel mit Steckdosen
- 4 Medienpanel mit Eckventilen
- 5 Ablage Medientischaufsatz
- 6 Medienkanal
- 7 Funktionsständer
- 8 Medienzuführungsschacht
- 9 Eingehängter Unterbau

Medientischaufsatz

Medientischaufsatz mit Hängeschränken,
H-Fuß-Tischgestell und Unterbauten auf Rollen

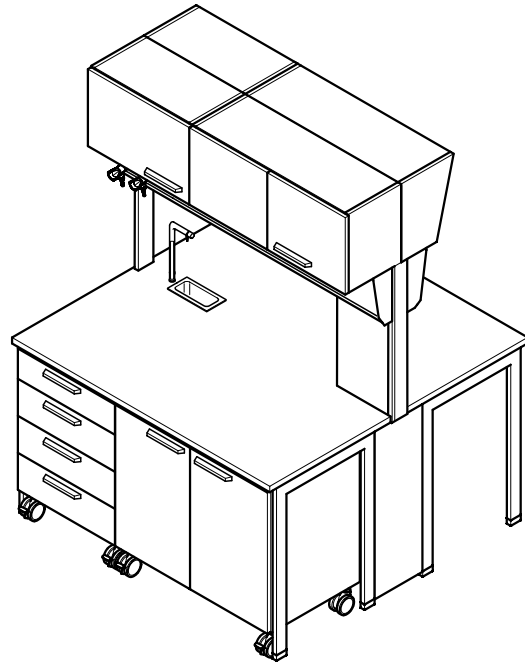

Medientischaufsatz mit Hängeschränken,
Ständerverlängerung und Unterbauten auf Sockel

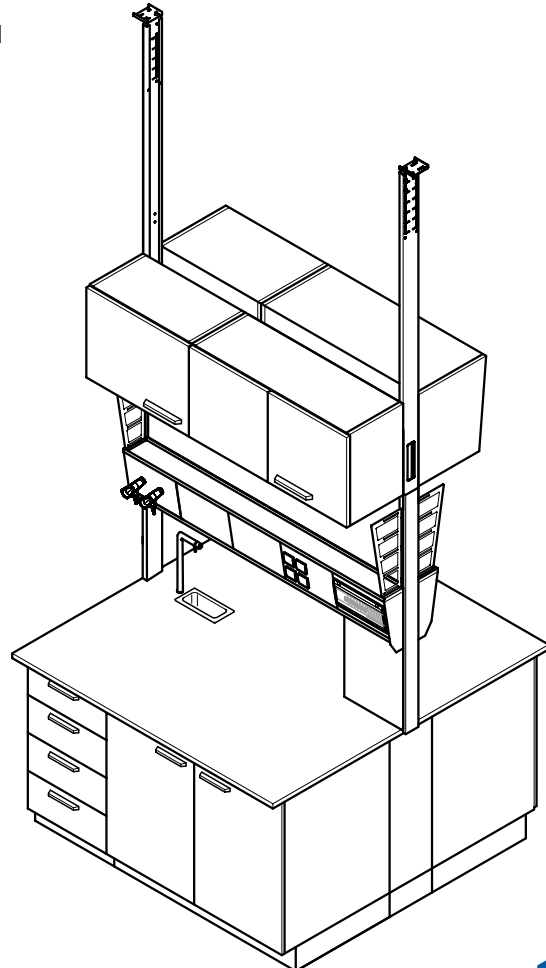

Medientischaufsatz

Technische Daten

Abmessungen					
Breite [mm]	600	900	1200	1500	1800
Tiefe [mm]	310				
Höhe [mm]	1602				
Höhe Durchgriff bei Arbeitshöhe 900 mm [mm]	450				
Höhe Ständerverlängerung [mm] (für Hängeschrank Höhe 460 mm)	462				
Höhe Ständerverlängerung [mm] (für Hängeschrank Höhe 760 mm)	762				
Höhe Ständerverlängerung [mm] (bis Deckenhöhe 3500 mm)	Abhängig von Deckenhöhe				
Medienpanel Breite x Höhe [mm]	300 x 200				
Ablage aus Glas Breite x Tiefe [mm]	Breite Tischaufsatz x 150				
Ablage aus beschichteter OSB-Platte Breite x Tiefe [mm]	Breite Tischaufsatz x 300				

Tragkraft	
Ablage aus Glas [kg]	20
Ablage aus beschichteter OSB-Platte [kg]	30
Stativhalter [kg]	5

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Doppelseitiger Medienkanal als Tischaufsatz mit Durchgriff oberhalb der Arbeitsplatte
Anzahl Medienpanels	Abhängig von Kanalbreite
Stativhalter ø [mm]	12 bis 13

Material	
Ablage Medientischaufsatz	Vollkern 5 mm

Elektrotechnik	
Elektroversorgung	Steckdosen in Medienpanel
Elektroabsicherung	Optional

Sanitärtechnik	
Sanitärversorgung	Medienpanel mit Entnahmearmaturen für Vakuum, Gase und/oder Wasser Versorgungsleitungen im Tischaufsatz